



烧瓶加热套“Fibroman-C”

双重加热电源. 最高温度为400 °C

带电源加热开关选择器

特点

带通电指示灯的两位隔离桥式开关加热控制

技术描述

- 带有环氧涂层的DUR ALLOY合金外壳
- 悬浮矿棉编织加热套
- 加热元件均匀分布在编织纱罩上
- 隔热外壳, 矿棉纤维隔热
- 镍连接器
- 设备后部有支架夹
- 为了防止破裂或溢出, 纱罩底部设有排水孔
- 安全接地

型号

Part No.	Flask capacity ml	Flask Ø approx. mm	Ø / Height (exterior) cm	Power W	Weight Kg
3003141	100	65	16 11	130	1
3003142	250	83	18 11	130	1,1
3003145	500	102	20 12	270	1,2
3031410	1000	132	22 13,5	410	1,4
3031420	2000	170	26 14	530	2
3031430	3000	190	29 18	620	2,2
3031450	5000	222	33 19	840	3,2
3314100	10000	290	38 22	2250	4,7
3314200*	20000	365	48 26	2300	11

* 加热套 part no. 3314200 不带2位控制器和开关.
参见配件 (第30页) 以及调节器和控制器 (第293,294页)



加热烧瓶的横截面




Position I
50% 功率输出



Position II
100% 功率输出

配件

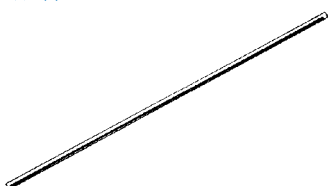

支撑杆 Dur-Aluminium, 12 Ø
x 700 mm 长
Part No. 6000270

